

VisiDark

ÉCLAIRAGE POUR LA MICROSCOPIE

VisiDark ONE 5400°K | VisiDark PLUS 6500°K

Éclairage annulaire en champ sombre pour l'inspection des surfaces et contours



AVANTAGES

- Inspection rapide et efficace, à l'œil nu ou sous un microscope
- Limitation de la fatigue oculaire
- Système polyvalent : de champ sombre à champ rasant
- Qualité de lumière stable dans le temps
- Possibilité de combiner ce système avec un système en champ clair (VisiBright)

Dédié à l'inspection des surfaces et contours, la gamme d'éclairages VisiDark offre une rapidité de détection exceptionnelle grâce à la grande directionnalité de sa lumière. L'inspection d'échantillons se réalise aussi bien à l'œil nu, ou sous un microscope pour une inspection plus détaillée. La distance de travail est ajustable, variant d'une configuration en champ sombre à champ rasant.

VisiDark est la révolution des éclairages en champs sombres : cette configuration offre une lumière puissante et précise de manière directionnelle vis-à-vis de l'échantillon étudié. Plus que jamais, l'éclairage rasant donne des images à contraste élevé, accentuant les bords de l'échantillon et les détails de surface. La possibilité de varier l'intensité révèle toutes les informations visuelles clés de l'échantillon, quelle que soit la matière, transparente ou opaque, réfléchissante ou mat, et l'inspection de dépôts ou d'impuretés est optimale. De plus, l'absence de chaleur générée par l'éclairage n'impacte ni l'observation ni l'objet observé.

L'uniformité et la directionnalité de la lumière L.E.S.S. sont uniques. Ces propriétés offrent un confort d'inspection sans précédent en accentuant les contrastes, en diminuant les réflexions lumineuses parasites et, par conséquent, en réduisant la fatigue oculaire. Afin de répondre aux normes des marchés les plus exigeants, la gamme VisiDark se décline en deux températures avec la VisiDark ONE à 5400°K et la VisiDark PLUS à 6500°K, toutes deux offrant un indice de rendu des couleurs exceptionnel (IRC > 90).

Les systèmes d'éclairage L.E.S.S. (microscopie, la vision industrielle et l'éclairage pour établis) ont des caractéristiques optiques identiques (température colorimétrique, uniformité et directionnalité). La qualité de lumière des systèmes d'éclairage reste constante sur leur durée de vie. Cette constance, aussi bien au cours du temps que sur l'intégralité de la chaîne de production, permet une standardisation et un gain de temps opérationnel considérable à toutes les phases d'inspection.

ÉCHANTILLONS SOUS MICROSCOPE



L.E.S.S. SA

Av. de Longemalle 13
CH-1020 Renens, Switzerland
Tel : +41 21 552 07 10
info@less-sa.com




VisiDark ONE 5400°K | VisiDark PLUS 6500°K


ÉCLAIRAGE POUR LA MICROSCOPIE

Éclairage annulaire en champ sombre pour l'inspection des surfaces et contours

FICHE TECHNIQUE

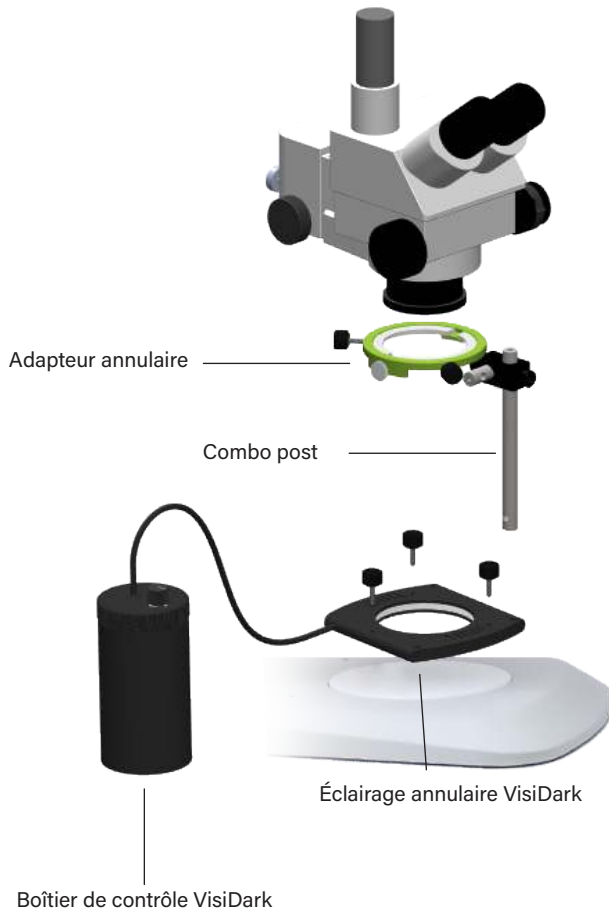

Profil d'intensité lumineuse
ultra directionnel

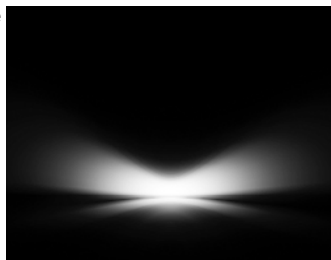

| | |
|--|-------------------------------|
| Nom | VisiDark ONE VisiDark PLUS |
| Référence | VDO-MI VDP-MI |
| Température colorimétrique | 5400°K 6500°K |
| Gamme | Eclairage pour la microscopie |
| IRC | > 90 |
| Distance de travail typique | 0 - 15 mm |
| Diamètre interne | 78 mm (3.1 inches) |
| Système d'attache | 78 mm (3.1 inches) |
| Câble | Flexible - 500 mm |
| Durée de vie | > 20 000 heures* |
| Boîtier de contrôle électrique | Intégré |
| Dimensions du boîtier | Ø72 x 149.5 mm |
| Mise sous tension | Interrupteur On/Off |
| Contrôle de la luminosité | Oui, de 0 à 100% |
| Température ambiante de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Alimentation externe | DC 12V |
| Dimensions de l'alim. ext. | 174 x 78 x 21.5 mm |

* La durée de vie des valeurs d'éclairage est définie lors d'une utilisation normale. Les résultats peuvent varier suivant les conditions environnementales et/ou lors d'utilisation spécifique du client.

ACCESSOIRE

■ Combo post:
fixé à l'adaptateur annulaire il permet l'intégration du système sur des objectifs de microscopes de 58 à 80 mm et d'ajuster l'élévation de l'anneau de lumière pour l'inspection précise d'échantillons à différentes hauteurs variant de 0 à 50 mm.

www.less-sa.com

less 
BE BRILLIANT



RISK CLASS 0
EN 62471: 2006

EYE-SAFE
CLASS 1 LASER PRODUCT
ICE 60825-1 2014-05

